

MshOt 明美

MF31

正置荧光显微镜


Upright Fluorescence Microscope



MF31正置荧光显微镜采用无限远平场消色差物镜和大视野目镜，可用双目或三目观察，搭配LED荧光激发装置，实现明场和荧光显微观察，供临床实验室利用显微放大原理观察微小细胞、组织等样本用。

特点:

- 高对比度LED荧光照明系统，图像清晰锐利
- 使用寿命长，简单易用，无须更多培训
- 可选配及定制不同荧光附件，适用各种荧光领域

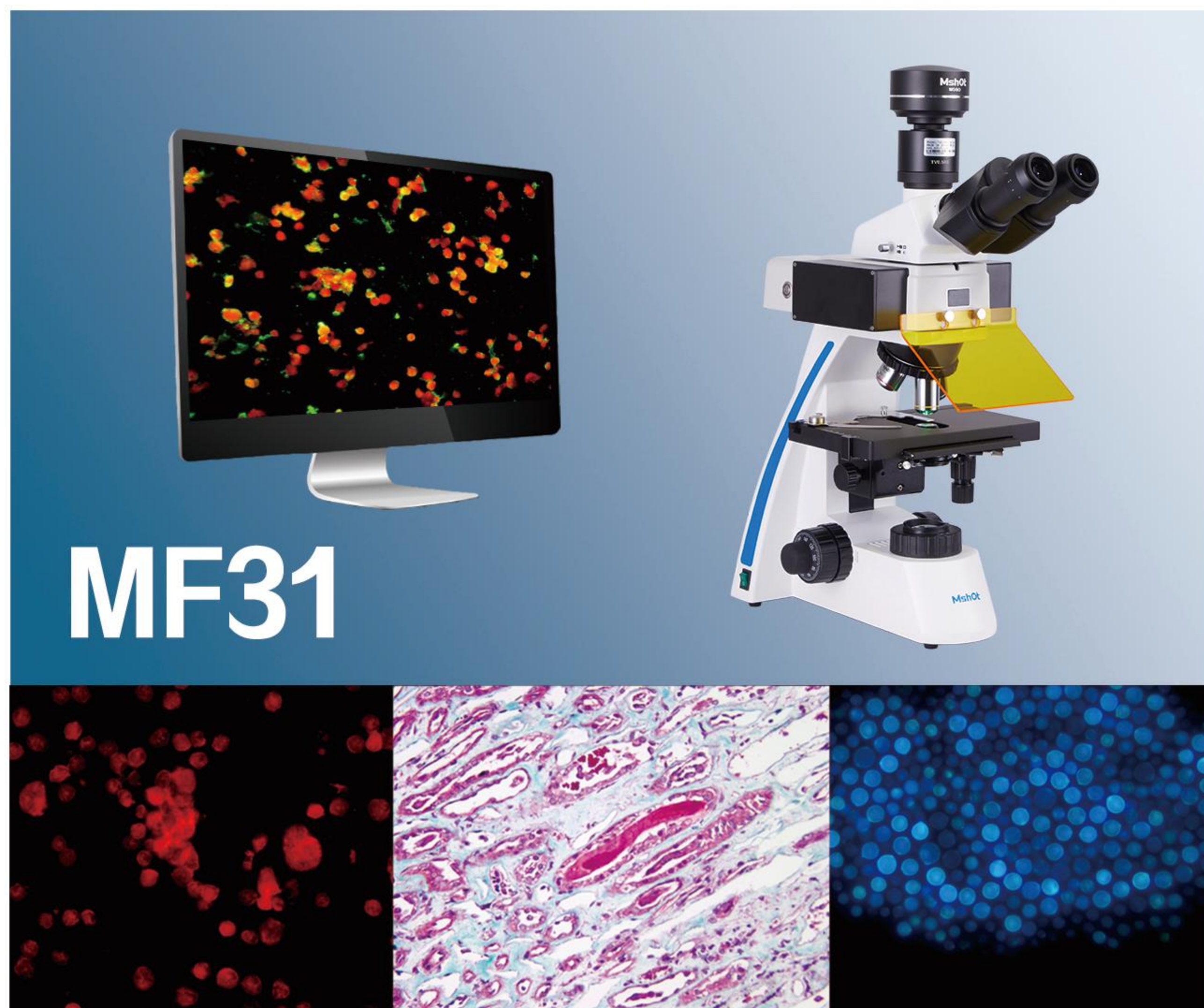

MF31

产品参数

| 项目 | 规格 |
|--------|--|
| 目镜 | 大视野WF10X, FN: 20mm |
| 目镜筒 | 铰链式三目头, 30° 倾斜 |
| 物镜 | 无限远平场消色差 4X/10X/40X/100X |
| 荧光模块 | 蓝色 (B) 激发: 460-490nm |
| | 绿色 (G) 激发: 510-550nm (选配) |
| | 紫外 (UV) 激发: 330-380nm (选配) |
| | 蓝紫外 (BU) 激发: U: 330-380nm; B: 460-490nm (选配) |
| | 蓝绿紫外 (BGU) 激发: U: 330-380nm; B: 460-490nm; G :510-550nm (选配) |
| 调焦机构 | 粗微动同轴调焦, 带锁紧和限位装置, 微动格值2 μm, 粗动行程每圈40mm, |
| | 微动行程每圈0.2mm, 调焦范围24mm |
| 物镜转换器 | 内向式四孔、五孔转换器 (可选) |
| 载物台 | 双层机械移动式 (尺寸:210mmX140mm, 移动范围: 75mmX50mm) |
| 透射照明系统 | 阿贝聚光镜 NA1.25 |
| | 白色LED, 亮度可调 |
| 相机接口 | 1XC (可选0.5XC) |



广州市明美光电技术有限公司

Guangzhou Micro-shot Optical Technology Co., Ltd.

公司地址: 广州市天河区华观路1933号万科云A栋506 / 电话: 020-38250606/38262481 / QQ: 505506350

网址: www.mshot.com / 邮箱: mshot@mshot.com / 服务热线: 400-880-1910



任何规格和外观的改变, 恕不另行通知。

CY240226